

Bruksanvisning

OmvoH 100 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

OmvoH 200 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

mirikizumab

2 förfyllda injektionspennor: 1 penna med 100 mg och 1 penna med 200 mg



Läs detta innan du injicerar Omvoh. Följ alla steg för steg-instruktioner.

- **2 Omvoh-injektioner krävs för full dos för behandling av Crohns sjukdom: en penna med 100 mg och en penna med 200 mg.**
- Injicera en Omvoh-penna och fortsätt direkt med den andra Omvoh-pennan.

Tänk också på följande:

- Läkaren eller sjuksköterskan ska visa dig hur du förbereder och injicerar Omvoh med injektionspennan. Injicera **inte** dig själv eller någon annan förrän du har blivit visad hur man injicerar Omvoh.
- Varje injektionspenna med Omvoh är endast avsedd för engångsbruk. Låt inte någon annan använda injektionspennan och återvänd den inte. Du kan sprida eller få infektioner.
- Läkaren eller sjuksköterskan kan hjälpa dig bestämma var på kroppen du ska injicera din dos. Du kan också läsa avsnittet ”Välj injektionsställe” i denna bruksanvisning för att få hjälp att välja vilket område som fungerar bäst för dig.
- Om du har syn- eller hörselproblem ska du inte använda Omvoh-pennan utan hjälp från en vårdare.
- Spara bruksanvisningen och läs den vid behov.

Innan du använder de förfyllda sprutorna med Omvoh ska du noga läsa igenom och följa alla steg för steg-anvisningar.

2 sprutor = full 300 mg-dos

Efter den första injektionen ska du **välja** ett nytt injektionsställe minst 5 cm från det första och rengöra det.


Upprepa sedan steg 1-3 med den andra pennan, omedelbart efter den första injektionen.

Du måste injicera 2 sprutor för att få hela 300 mg-dosen.

Omvoh-pennans delar

Injicera båda pennorna i valfri ordning för att få hela 300 mg-dosen.

200 mg-pennan är större än 100 mg-pennan.

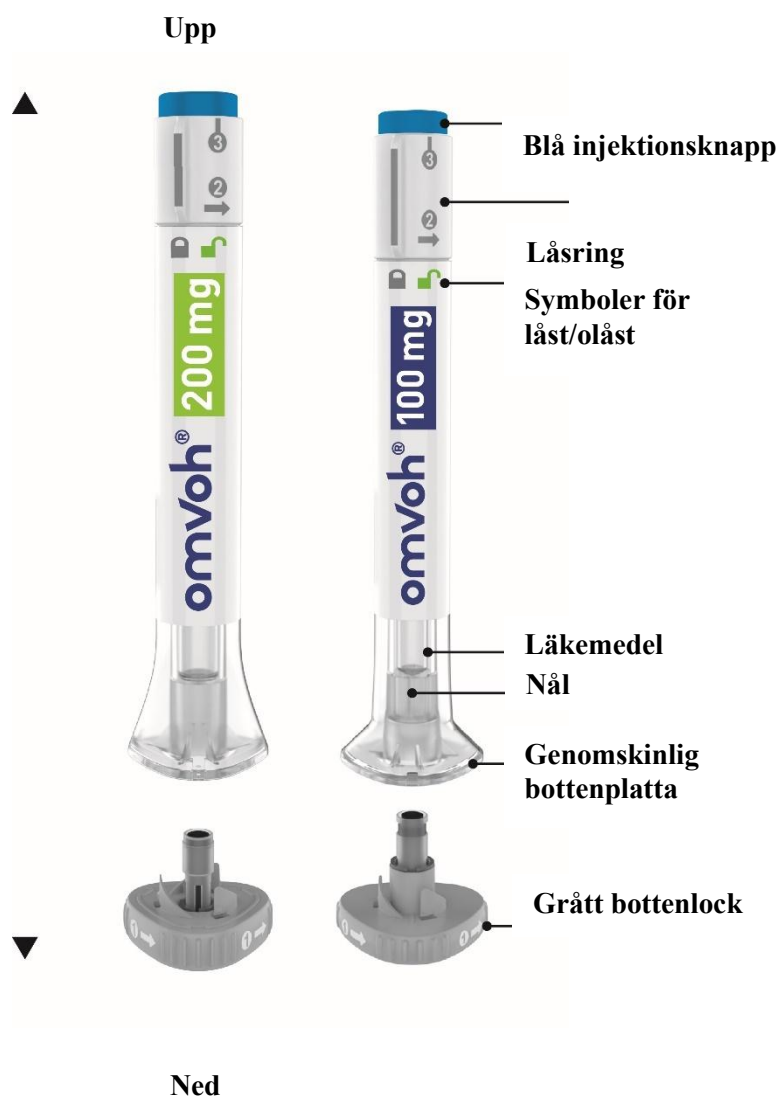

100 mg + 200 mg = 1 full dos

VIKTIGT:

- 2 injektioner krävs för full dos för behandling av Crohns sjukdom: en penna med 100 mg och en penna med 200 mg.
- Injicera en injektionspenna och fortsätt sedan direkt med den andra.

Förbereda injektionen med Omvoh

Ta ut injektionspennorna ur kylskåpet

Ta ut 2 Omvoh-pennor ur kylskåpet.

Låt de grå bottenlocken sitta kvar tills du är redo att injicera.

Låt injektionspennorna stå i rumstemperatur i 45 minuter innan du injicerar.

Injektionspennorna **får inte** värmas i mikrovågsugn, sköljas i hett vatten eller utsättas för direkt solljus.

Använd **inte** injektionspennorna om läkemedlet har varit fryst.

Skaka **inte** pennorna.

Samla ihop tillbehör


Tillbehör:

- 2 sprittorkar
- 2 bomullstussar eller kompresser
- 1 behållare för stickande och skärande avfall (se ”Kassering av Omvoh-pennor”)

Inspektera injektionspennorna och läkemedlet

Kontrollera att du har rätt läkemedel. Läkemedlet i pennorna ska vara genomskinligt. Det kan vara färglöst eller svagt gult.

Utgångsdatum

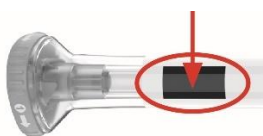


Använd **inte** injektionspennorna och kassera dem enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar om:


- de ser ut att vara skadade
- läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar
- utgångsdatum som står på etiketten har passerat
- läkemedlet är fryst.

Förbered injektionen

Välj injektionsställe

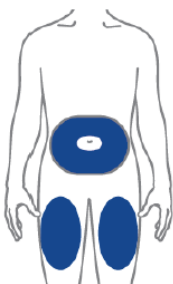

Du eller en annan person kan injicera dessa områden

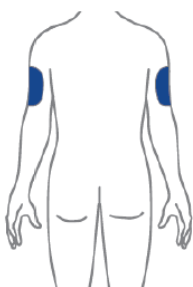

En annan person ska injicera i dessa områden.

Tvätta händerna med tvål och vatten innan du injicerar Omvoh.

Läkaren eller sjuksköterskan kan hjälpa dig välja det injektionsställe som passar dig bäst.

- **Du eller någon annan** kan injicera läkemedlet i magområdet (buken). Injicera **inte** närmare naveln än 5 centimeter.
- **Du eller någon annan** kan injicera läkemedlet på lårens framsida. Området ska vara minst 5 centimeter ovanför knät och 5 centimeter under ljumsken.
- **Någon annan** kan injicera läkemedlet i baksidan av din överarm.
- Injicera **inte** på precis samma ställe varje gång. Om du till exempel gav den första injektionen i buken kan den andra injektionen – för att ge hela dosen – ges på ett annat ställe i buken.
- Injicera **inte** i områden där huden är öm, skadad, röd eller hård.

Rengör injektionsstället med en sprittork. Låt injektionsstället lufttorka innan du injicerar läkemedlet.

Injicera Omvoh

1 Ta av skruvlocket från injektionspennan



Kontrollera att injektionspennan är låst.

- Låt det grå bottenlocket sitta kvar tills du är redo att injicera.
- Vrid av det grå bottenlocket och kasta det i hushållssoporna.
- Sätt **inte** tillbaka det grå bottenlocket – det kan skada nålen.
- Rör **inte** nålen.




2 Placera och lås upp

- Placera och håll den genomskinliga bottenplattan plant och stadigt mot huden.




Håll bottenplattan mot huden och vrid låsringen till det **olåsta** läget.

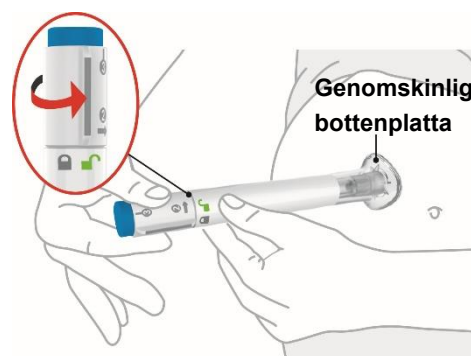

3 Tryck in och håll kvar i upp till 15 sekunder

- Tryck ner och håll den blå injektionsknappen intryckt. Du hör ett högt klickljud (injektionen har startat).
- Håll kvar den genomskinliga bottenplattan mot huden. Du hör ytterligare ett klick cirka 15 sekunder efter det första (injektionen är slutförd).

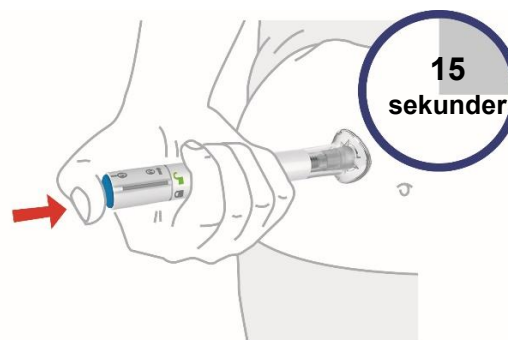

- Du vet att injektionen är klar när du ser den grå kolven.
- Ta bort injektionspennan från huden.
- Om du blöder på injektionsstället trycker du en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället.
- Gnugga **inte** på injektionsstället.




Grå kolv

2 injektioner krävs för full dos. Injicera den ena injektionspennan och fortsätt direkt med den andra.

Kassera Omvoh-pennor

Kasta använda pennor

- Lägg den använda injektionspennan i en behållare för stickande och skärande avfall omedelbart efter användning. Kasta inte injektionspennan i hushållssoporna.

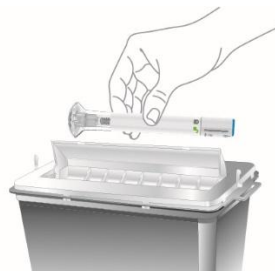

- Om du inte har någon behållare för stickande och skärande avfall kan du använda en behållare som:
 - är tillverkad av kraftig plast
 - kan stängas med tättslutande, punktionssäkert lock, utan att stickande/skärande föremål kan komma ut
 - står upprätt och stadigt under användning
 - är läckagesäker
 - är korrekt märkt med en varning om farligt avfall i behållaren.
- När behållaren för stickande och skärande avfall är nästan full ska du följa lokala riktlinjer för hur en behållare för stickande och skärande avfall ska kasseras. Det kan finnas lokala föreskrifter om hur du ska kasta nålar och injektionspennor.
- Behållaren för stickande och skärande föremål ska inte återvinnas.
- För mer information om hur du kasserar behållaren på rätt sätt, fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan om tillgängliga alternativ i ditt område.

Vanliga frågor

F. Vad händer om jag låter injektionspennorna värmas upp i mer än 45 minuter innan jag injicerar?

S. Pennan kan förvaras i rumstemperatur upp till 30 °C i upp till 2 veckor.

F. Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i injektionspennan?

S. Det är normalt att det finns luftbubblor i injektionspennan. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

F. Vad ska jag göra om jag ser en vätskedroppe på nålens spets när jag tar bort det grå bottenlocket?

S. En vätskedroppe på nålspetsen har ingen betydelse. Den kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

F. Vad händer om jag låste upp injektionspennan och tryckte ned den blå injektionsknappen tills injektionen är klar?

S. Ta **inte** bort det grå bottenlocket och använd inte injektionspennan. Tala med läkare eller apotekspersonal för att få en ny.

F. Måste jag hålla injektionsknappen intryckt ända tills injektionen är klar?

S. Du behöver inte hålla den blå injektionsknappen intryckt, men det kan hjälpa dig att hålla injektionspennan stadigt och stilla mot huden.

F. Vad ska jag göra om nålen inte drogs in efter injektionen?

S: Rör **inte** nålen och sätt inte tillbaka det grå bottenlocket. Förvara injektionspennan på en säker plats för att undvika oavsiktliga nålstick och kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

F. Vad händer om jag har en droppe vätska eller blod på huden efter injektionen?

S: Detta är normalt. Tryck en bomullstuss eller en kompress mot injektionsstället. Gnugga **inte** på injektionsstället.

F. Vad händer om jag hörde fler än 2 klick under injektionen – 2 höga klick och ett lägre. Fick jag hela injektionen?

S: Ibland kan man höra ett lite lägre klick strax före det andra höga klicket. Det ingår i injektionspennans normala funktion. Ta **inte** bort injektionspennan från huden förrän du hör det andra, högre klicket.

F. Hur vet jag om injektionen är klar?

S: När du tryckt in den blå injektionsknappen hör du 2 höga klick. Det andra klicket betyder att injektionen är klar. Den grå kolven syns då också överst i den genomskinliga bottendelen.

Läs hela bipacksedeln till Omvoh som finns i ytterkartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

Ändrades senast 30 okt 2025