

Bruksanvisning

Förfylld flerdos injektionspenna

En injektionspenna innehåller 4 doser, en dos tas en gång i veckan.

Mounjaro 2,5 mg/dos KwikPen injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Mounjaro 5 mg/dos KwikPen injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Mounjaro 7,5 mg/dos KwikPen injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Mounjaro 10 mg/dos KwikPen injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Mounjaro 12,5 mg/dos KwikPen injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Mounjaro 15 mg/dos KwikPen injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
tirzepatid

Denna bruksanvisning innehåller information om hur Mounjaro KwikPen ska användas.



Viktig information som du behöver känna till innan du injicerar med Mounjaro KwikPen.

Läs denna bruksanvisning och bipacksedeln innan du börjar injicera med Mounjaro KwikPen och varje gång du får en ny injektionspenna. Det kan ha tillkommit ny information. Denna information ersätter inte dina samtal med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om din sjukdom eller behandling.

Mounjaro KwikPen är en förfylld flerdos injektionspenna. **Injektionspennan innehåller 4 doser, en dos tas en gång i veckan.** Injicera en dos per vecka under huden (subkutan).


Kassera injektionspennan (inklusive oanvänt läkemedel) efter den fjärde dosen. Det går inte att ställa in en full dos på injektionspennan efter att du injicerat fyra veckodoser. **Injicera inte** överblivet läkemedel. För inte över läkemedlet från injektionspennan till en spruta.

Dela inte din Mounjaro KwikPen med andra, även om kanylen har bytts ut. Du kan smitta dem med en allvarlig infektion eller själv få en allvarlig infektion.


Injektionspennan får inte användas av blinda eller synskadade personer, såvida de inte får hjälp av en person som tränats i att använda injektionspennan.

Injektionspennans delar

Mounjaro KwikPen-injektionspennans delar

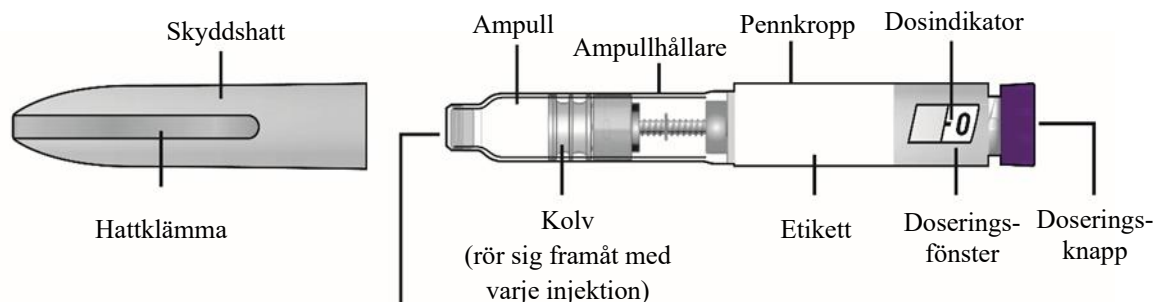

Kanylens delar (kanyler följer ej med pennen)

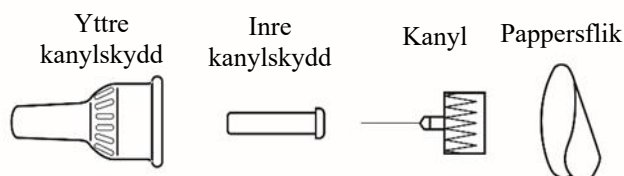


Kanyl som är lämplig för KwikPen (om du inte vet vilken kanyl som passar, fråga läkare eller sjuksköterska)

Följande behövs för din injektion


- Mounjaro KwikPen
- kanyl som är lämplig för KwikPen (om du inte vet vilken kanyl som passar, fråga läkare eller sjuksköterska)
- kompress eller bomullstuss
- behållare för vassa föremål eller en annan behållare

Förberedelser inför injektionen med Mounjaro KwikPen

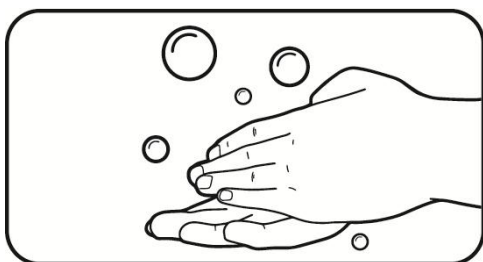

Steg 1:

- Tvätta händerna med tvål och vatten.

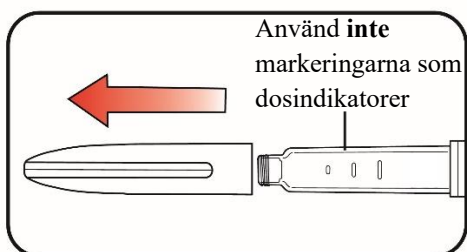


Steg 2:

- Dra skyddshatten rakt ut.
- Inspektera injektionspennan och etiketten.


Använd **inte** injektionspennan om

- läkemedlets namn eller styrka inte motsvarar ditt recept.
- injektionspennans utgångsdatum (EXP) har passerats eller om injektionspennan ser ut att vara skadad.
- läkemedlet har varit fruset, innehåller partiklar eller är grumligt eller missfärgat. Mounjaro ska vara färglös till svagt gul.

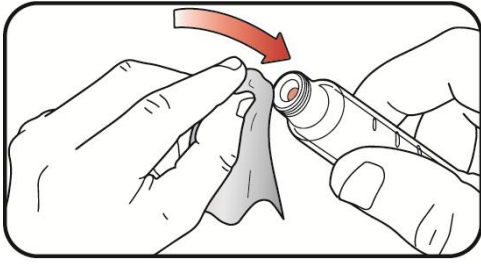


Steg 3:

- Torka av den röda inre förslutningen med en kompress.

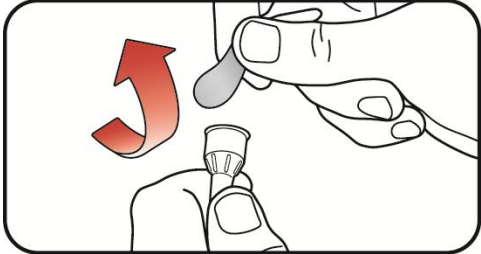


Steg 4:

- **Ta en ny kanyl.** Använd alltid en ny kanyl vid varje injektion för att förhindra infektioner och att kanylen blir igentäppt.
- Riv av pappersfliken från det yttre kanylskyddet.

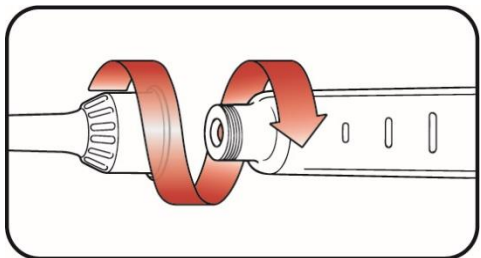


Steg 5:

- Sätt kanylen med kanylskyddet rakt på pennan och skruva tills den sitter fast ordentligt.

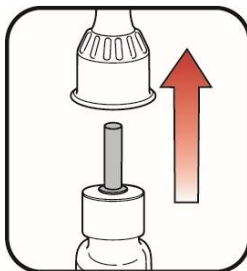


a. Yttre kanylskydd

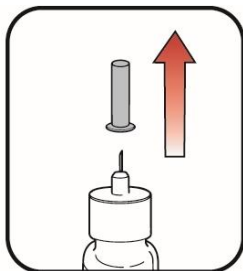

b. Inre kanylskydd


Steg 6:

- Ta av det yttre kanylskyddet och spara det. Du behöver det senare.
- Ta av det inre kanylskyddet och kassera det.

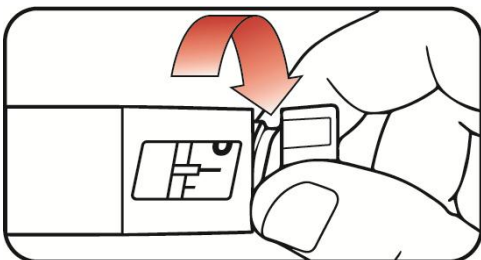


Steg 7:

- Vrid långsamt doseringsknappen tills du hör **2 klick** och ser den längre linjen i  doseringsfönstret. Det här är förberedelseläget. Du kan justera det genom att vrida på doseringsknappen framåt eller bakåt tills den längre linjen är i linje med doseringsindikatorn.

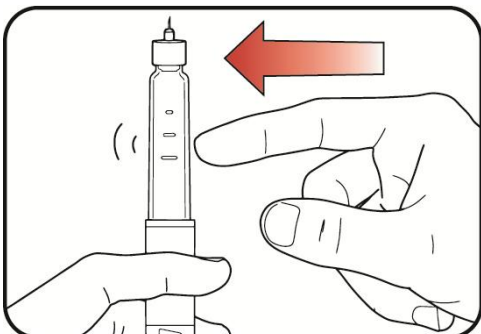

Steg 8:

- Håll injektionspennan med kanylen pekande uppåt.
- Knacka försiktigt på ampullhållaren så att luftbubblorna stiger upp till ytan.

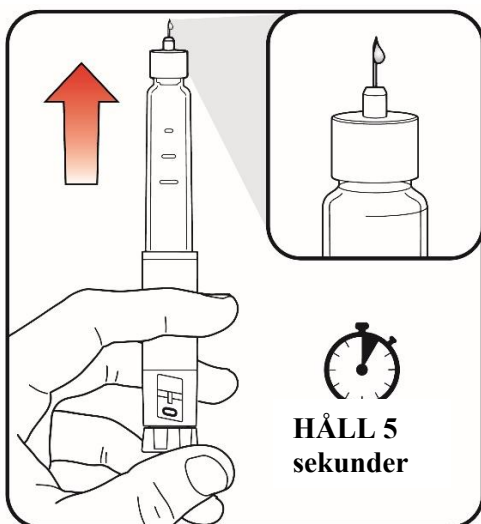

Steg 9:


- Frisätt lite läkemedel från injektionspennan genom att **trycka in doseringsknappen** tills det tar stopp, och **räkna sedan långsamt till 5 medan du håller in doseringsknappen**.

Symbolen **0** ska då synas i doseringsfönstret. **Injicera inte** läkemedlet ännu i detta skede.

Vid förberedande flödeskontroll avlägsnas luft från ampullen för att säkerställa att injektionspennan fungerar som den ska. Pennan har förberetts korrekt om en liten mängd läkemedel kommer ut från kanylspetsen.

- Om du inte ser någon läkemedelsdroppe, upprepa **stegen 7–9** högst 2 gånger.
- Om du fortfarande inte ser någon läkemedelsdroppe, byt kanyl och upprepa **stegen 7–9** högst 1 gång till.
- Om du efter detta ändå inte ser någon läkemedelsdroppe, kontakta den lokala representanten för Lilly som nämns i bipacksedeln.

Injicera med Mounjaro KwikPen

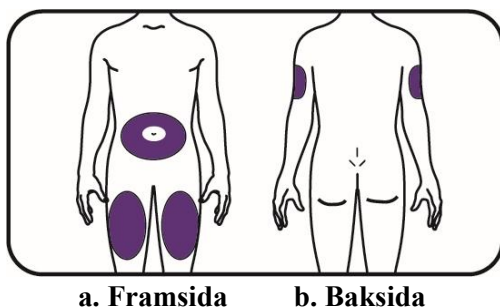


a. Framsida

b. Baksida

Steg 10:


- Välj injektionsställe.
 - a. Du eller någon annan person kan injicera läkemedlet i låret eller magen (buken) minst 5 cm från naveln.
 - b. En annan person kan ge dig en injektion på baksidan av överarmen.
- **Byt** injektionsställe varje vecka. Du kan injicera i samma område, men välj alltid ett annat injektionsställe på området i fråga.

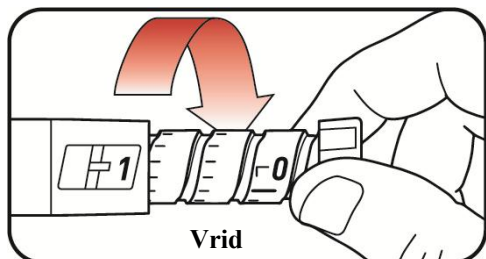

Vrid


Steg 11:

- Vrid doseringsknappen tills den stannar och symbolen **1** syns i doseringsfönstret. Symbolen **1** betyder en full dos.

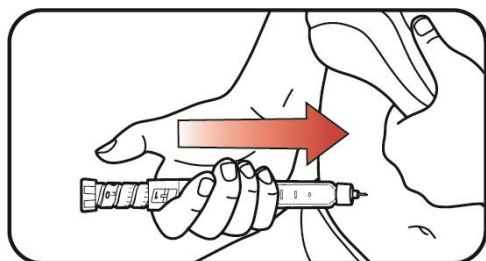


Steg 12:

- a. Stick in kanylen i huden.

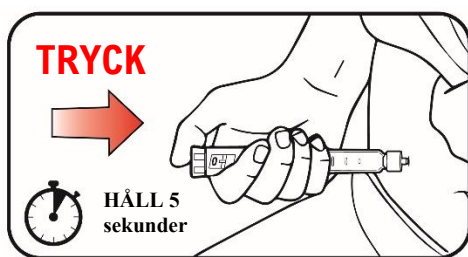

- b. Injicera läkemedlet genom att **trycka in doseringsknappen** tills det tar stopp och **räkna sedan långsamt till 5 medan du håller in doseringsknappen**. Försäkra dig om att symbolen **0** syns i doseringsfönstret innan du drar ut kanylen.

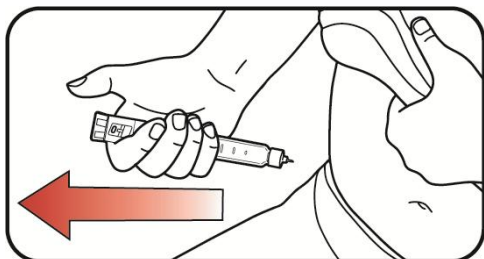


Steg 13:

- Dra ut kanylen ur huden. En droppe läkemedel på kanylspetsen är normalt. Det påverkar inte din dos.
- Försäkra dig om att symbolen **0** syns i doseringsfönstret.

Om du ser symbolen **0** i doseringsfönstret har du fått hela dosen.


Om du inte ser symbolen **0** i doseringsfönstret, stick in kanylen i huden igen och avsluta injektionen. Ställ **inte** in dosen igen. Om du fortfarande inte tror att du fått hela dosen, börja **inte** om igen, och ge **inte** ytterligare en injektion. Se "Förvaring av Mounjaro KwikPen" eller "Vanliga frågor" för mer information.

Efter injektionen med Mounjaro KwikPen

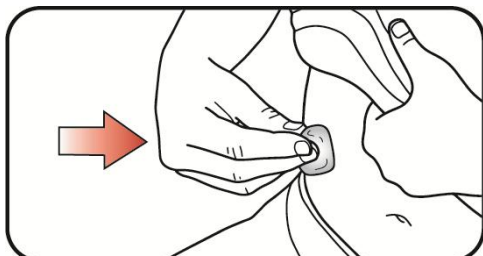


Steg 14:

- Om du ser blod på injektionsstället när du drar ut kanylen från huden, tryck lätt på injektionsstället med en kompress eller bomullstuss. Gnugga **inte** på injektionsstället.

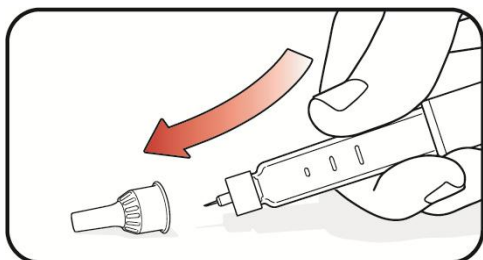


Steg 15:

- Sätt försiktigt på det yttre kanylskyddet igen.

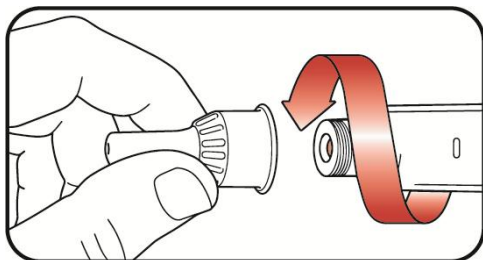

Steg 16:

- Skruva av kanylen med kanylskyddet och lägg den i en behållare för vassa föremål (se "Kassering av Mounjaro KwikPen och kanyler"). Förvara **inte** injektionspennan med kanylen monterad, för att förhindra att pennan läcker, att kanylen blir igentäppt eller att det kommer in luft i injektionspennan.

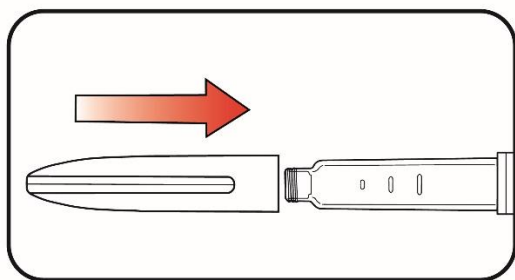

Steg 17:

- Sätt tillbaka skyddshatten.
Förvara **inte** injektionspennan utan skyddshatt.

Förvaring av Mounjaro KwikPen

Oanvända injektionspennor:

- Förvara **oanvända injektionspennor i kylskåp** vid 2 °C–8 °C.
- Oanvända injektionspennor kan användas fram till utgångsdatum som är tryckt på etiketten, om de har förvarats i kylskåp.
- Injektionspennan får **inte** frysas. Kasta injektionspennan (kassera enligt gällande anvisningar) om den har varit frusen.

Injektionspennor som är i bruk:

- Du kan förvara en **injektionspenna som du börjat använda i rumstemperatur** (under 30 °C) efter injektionen.
- Förvara injektionspennan och kanylerna utom syn- och räckhåll för barn.
- Kassera injektionspennan 30 dagar efter att du använt den första gången, även om den fortfarande innehåller läkemedel.
- Kassera injektionspennan när du injicerat fyra veckodoser. Försök inte injicera eventuellt överblivet läkemedel i injektionspennan, eftersom du då kan få en ofullständig dos.

Kassering av Mounjaro KwikPen och kanyler:

- Lägg använda kanyler i en behållare för vassa föremål eller en behållare av hårdplast med lock.
- Kasta **inte** separata kanyler bland hushållsavfall.
- Kassera använda injektionspennor enligt anvisningar du fått.
- Fråga apotekspersonalen hur man kastar behållare för vassa föremål.
- Återanvänd inte behållaren för vassa föremål.

Vanliga frågor:

- Om du inte kan ta bort skyddshatten, vrid den försiktigt fram och tillbaka och dra den sedan rakt ut.
- Om du inte kan vrida fram doseringsknappen till **1** i doseringsfönstret:
 - Kassera injektionspennan och eventuellt kvarvarande läkemedel. Det kan vara för lite läkemedel kvar i pennan för att ge en full dos. **Försök inte** att injicera överblivet läkemedel.
- Om det är svårt att trycka in doseringsknappen:
 - Det kan gå lättare att injicera om du trycker in doseringsknappen långsammare.
 - Kanylen kan vara blockerad. Sätt på en ny kanyl och förbered injektionspennan på nytt.
 - Det kan ha fastnat damm, mat eller vätska på insidan av injektionspennan. Kassera injektionspennan och ta en ny.

- Om du har ytterligare frågor eller problem som gäller Mounjaro KwikPen kontakta en representant för Lilly eller läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Kalender som stöd för användningen av läkemedlet:

Använd Mounjaro KwikPen en gång i veckan.

Jag injicerar min veckodos på nedan angivna dagar.

Anteckna veckodagen när du väljer att injicera. Ge injektionen på samma dag varje vecka (Exempel: Måndag).

(Dag/Månad) (Dag/Månad) (Dag/Månad) (Dag/Månad)

--

--	--	--	--

Ändrades senast juli 2025